

取扱説明書

やさしい「はり」ごこち

■安全設計

個別包装され開封まで無菌維持された商品です。1枚のテープに接触部を樹脂で固定しているため、接触部が取れる心配はほとんどありません。

■衛生的

指がテープの粘着面に触れることがないように、独自の工夫を施しましたので、衛生的にご使用いただけます。

■皮膚にやさしい

テープは通気性の良い医療用テープを使用しているため、ムレたり、かぶれたりすることが少ないです。しかも剥がれにくく、皮膚にぴったり密着します。

※使用感には個人差がありますので使用上の注意を順守してください。

■品質管理

国内一貫生産のもと、ISO13485を認証取得し、徹底した品質管理体制を確立しております。

使用上の注意


- 肌に傷、湿疹などのあるところには使用しないでください。
- 目の周囲及び粘膜部分には使用しないでください。
- 一度使った本品を貼り直すとテープが剥がれやすくなりますので貼り直しはしないでください。
- 本品を貼った状態でシャワーや入浴、水泳などをするとテープが剥がれやすくなりますので、事前に剥がしてください。
- 本品の使用によって皮膚に発疹、発赤、かゆみ等、通常とは異なる反応を示したり、感じた場合は使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 伸縮性に優れたテープではありません。テープが剥がれやすくなる可能性がありますので貼る部分の筋肉、皮膚を伸ばした状態で貼るようにしてください。
- お子様に使用する際は、保護者のもとで使用し、目や口に入らないように十分注意してください。
- お子様の手が届かないところに保管してください。

警 告

- ご使用に際しては、添付文書をよくお読みください。


使用 方 法

1

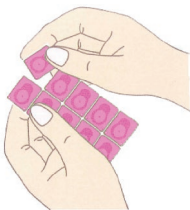


無菌維持された個別包装のケースを1つ取りはずします。

2

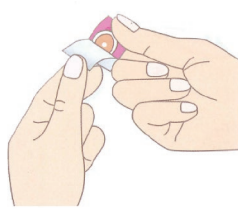


シール紙を剥がします。

3

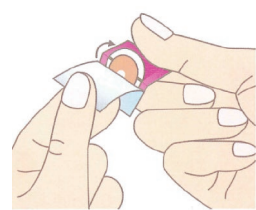

カートリッジを山折にします。

4

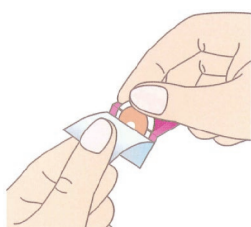

テープと共に台紙(扇形のシート)を指ではさみ、つまみあげてください。

5



台紙のついた状態で皮膚に貼付してください。

6



貼付後、残っている台紙を外し、テープ全体を上から押さえて確実に貼付してください。

一般医療機器

医療機器届出番号：22 B1X 00006000007

一般的名称：非侵襲式家庭向け鍼用器具

販売名：やさしい「はり」ごこち

使用目的：身体に刺入せず皮膚に貼付する器具

入数：20本入

サイズ：0.3mm

接触部材料：ステンレス鋼線

製造販売業者：セイリン株式会社

静岡県静岡市清水区大内147

お問い合わせ先：0120-100877

受付時間 9時から17時まで
(土・日・祝日を除く)