

肩・腰・足など体全体のコった部分に貼るだけ

■安全設計

個別包装され開封まで無菌維持された商品です。
1枚のテープに接触部を樹脂で固定しているため、
接触部が取れる心配はほとんどありません。

■衛生的

指がテープの粘着面に触れることがないよう、独自の
工夫を施しましたので、衛生的にご使用いただけます。

使用上の注意

- 肌に傷、湿疹などのあるところには使用しないでください。
- 目の周囲及び粘膜部分には使用しないでください。
- 一度使った本品を貼り直すとテープが剥がれやすくなりますので貼り直しはしないでください。
- 本品を貼った状態でシャワーや入浴、水泳などをするとテープが剥がれやすくなりますので、事前に剥がしてください。
- 本品の使用によって皮膚に発疹、発赤、かゆみ等、通常とは異なる反応を示したり、感じた場合は使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 伸縮性に優れたテープではありません。テープが剥がれやすくなる可能性がありますので貼る部分の筋肉、皮膚を伸ばした状態で貼るようにしてください。
- お子様を使用する際は、保護者のもとで使用し、目や口に入らないように十分注意してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。

警 告

- ご使用に際しては、添付文書をよくお読みください。

使用 方 法

1




無菌維持された個別包装のケースを1つ
取りはずします。

2




シール紙を剥がします。

3

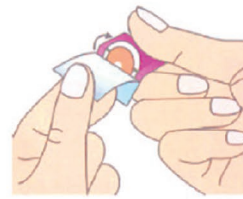

カートリッジを山折にします。

4

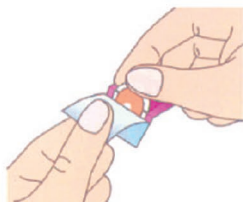


テープと共に台紙(扇形のシート)を
指ではさみ、つまみあげてください。

5



台紙のついた状態で皮膚に貼付してく
ださい。


6

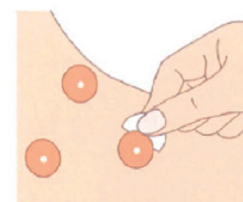

貼付後、残っている台紙を外し、テープ全体
を上から押さえて確実に貼付してください。

コリの緩解のポイント

コリ・痛みのある部位を指で押して、よく感じる部位に貼付すると効果的です。

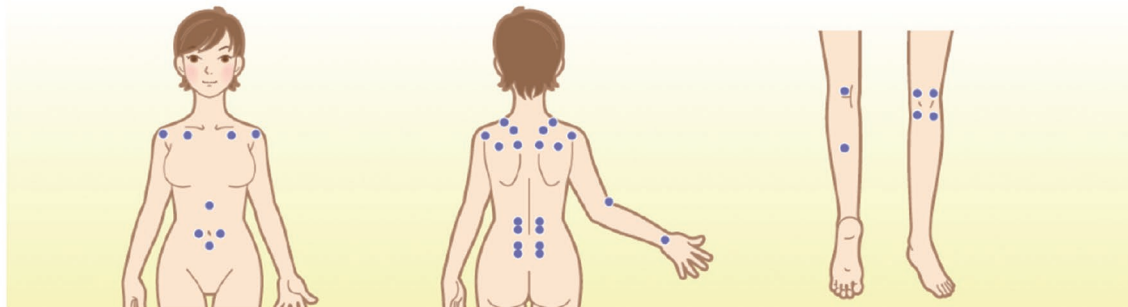

一般医療機器

医療機器届出番号：22B1X00006000008
一般的名称：家庭用貼付型接触粒
販 売 名：パッチタン
使 用 目 的：コリの部分に貼付することにより圧迫しコリの緩解をする
入 数：20 本入
接触部材料：チタン合金

製造販売業者：セイリン株式会社

静岡県静岡市清水区大内147

お問い合わせ先：0120-100877

受付時間 9時から17時まで
(土・日・祝日を除く)